



RehaGirona, sl
Trens Petits 1
Pol. Ind. Mas Xirgu
17005 Girona

T +34 902 48 72 72
F +34 972 40 50 54
www.rehagirona.com
rehagirona@rehagirona.com

MOMO

Triciclo y bicicleta terapéutica





schuchmann
nah am Menschen




INDICE	PAGINA
1. Esquema del Momo	
1.1 Bicicleta terapéutica	2
1.2 Triciclo terapéutico	2
2. Montar la bicicleta/triciclo antes de usarla	
2.1 Montar el manillar	3
2.2 Ajustar la altura del manillar	3
2.3 Ajustar la altura del asiento	3
2.4 Montar las ruedas de soporte a la bicicleta terapéutica	4
3. Montar, ajustar y uso del sistema de frenado	
3.1 Uso del freno	4
3.2 Montar y ajustar el freno	5
4. Cargando pasajeros	6
5. Cuidado y mantenimiento	6
6. Información técnica	6
7. Garantía y condiciones	7

1. ESQUEMA DEL MOMO

1.1 Bicicleta terapéutica

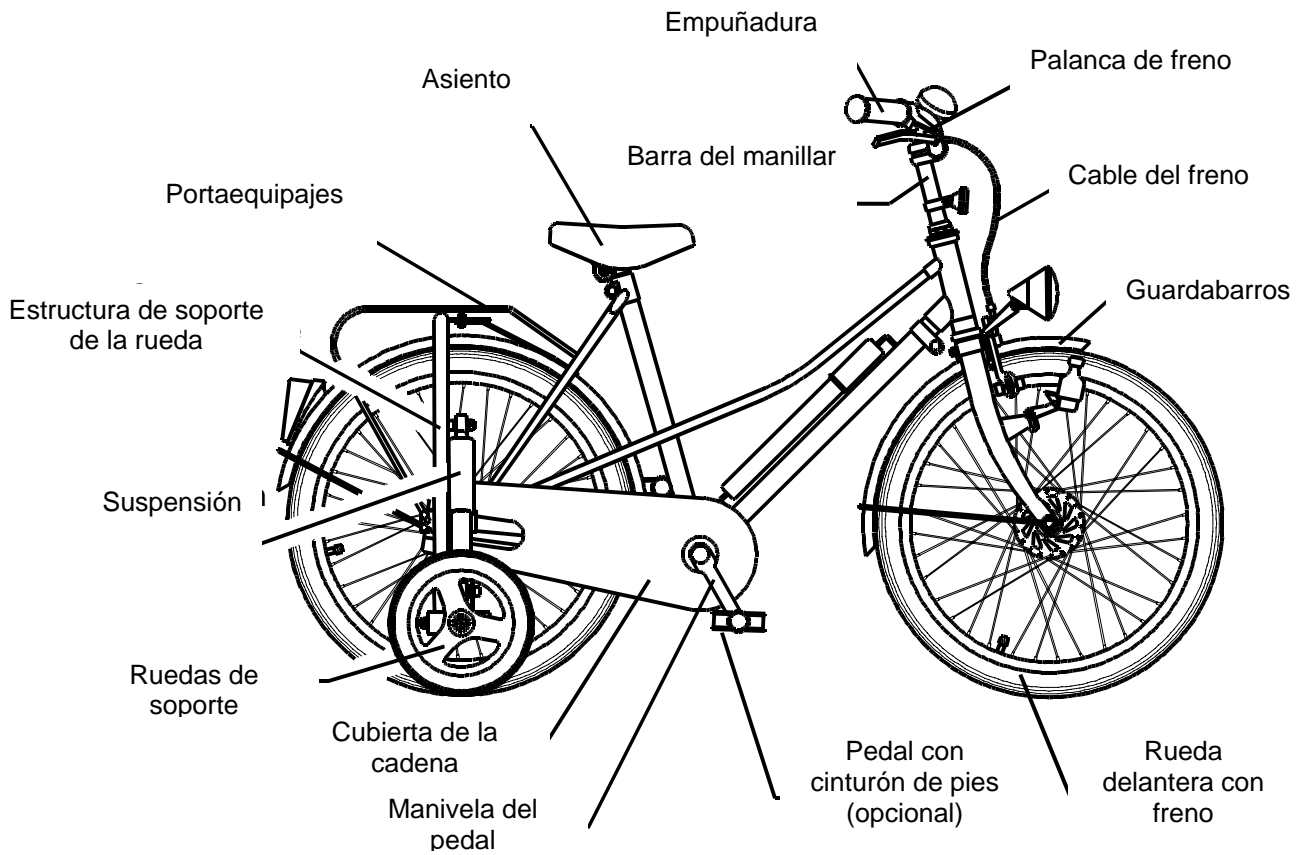


1.2 Triciclo terapéutico

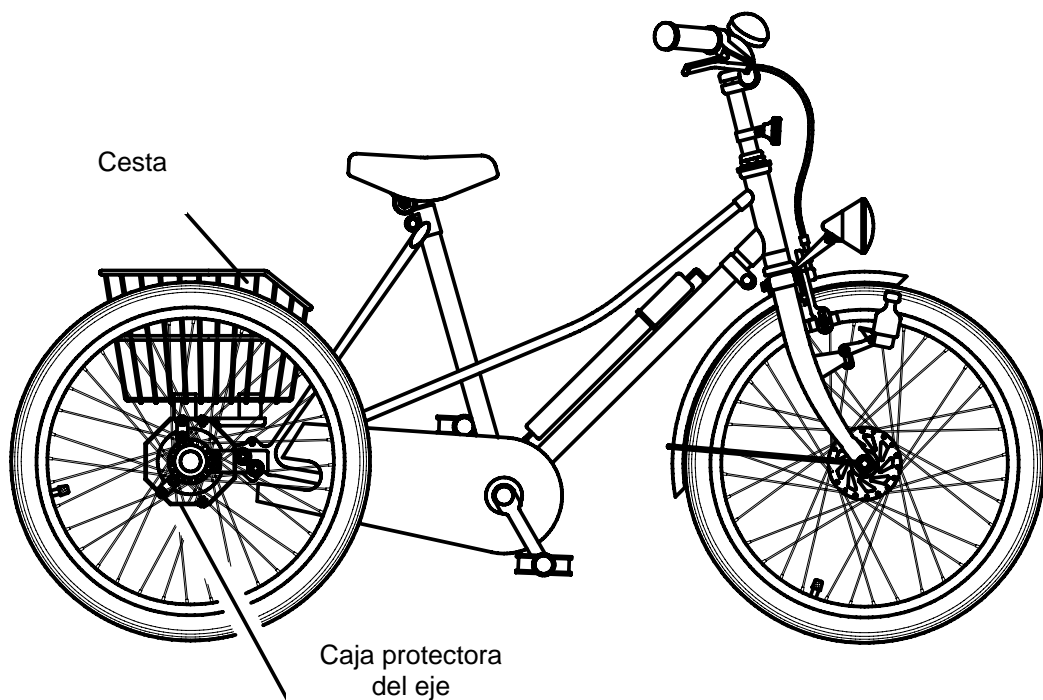

2. MONTAR LA BICICLETA ANTES DE USARLA


2.1 Montar el manillar

Afloje el tornillo (véase flecha) del extremo del tubo del manillar (con una llave inglesa de 13 mm); de esta forma podrá girar el manillar. Ajústelo según sus necesidades (1) y seguidamente apriete firmemente el tornillo.

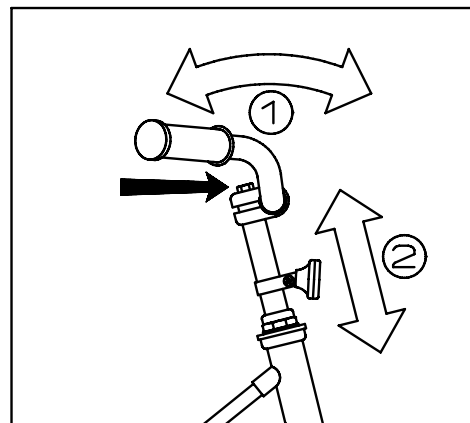

2.2 Ajustar la altura del manillar

Para ajustar la altura del manillar, deberá dar tres vueltas al mismo tornillo en el sentido de las agujas del reloj. A continuación, golpee el tornillo con un martillo para introducir la barra del manillar en el interior del tubo. Será mejor usar un martillo de goma o plástico o bien colocar una pieza de madera entre el tornillo y martilla para no dañar el tornillo. Coloque el manillar en la posición deseada (2), reajuste el ángulo del manillar y apriete firmemente los tornillos.

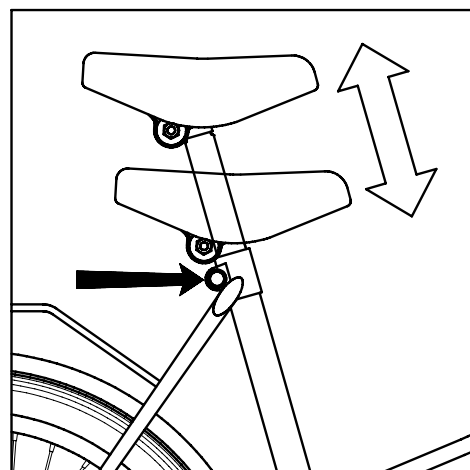

2.3 Ajustar la altura del asiento

Para ajustar la altura del asiento, deberá aflojar los tornillos (véase flecha) con una llave inglesa de 13 mm.


Apriete firmemente los tornillos una vez hecho el ajuste y el asiento esté correctamente posicionado.

Aviso importante:

Los manillares y las barras del asiento, tienen unas marcas que indican la altura máxima que pueden alcanzar y que no debe sobrepasarse por razones de seguridad.

Si se sobrepasan las marcas, los tubos no sujetan suficientemente para dar un soporte seguro al peso del usuario de la bicicleta.

Las marcas varían según el tubo de que se trate (véase dibujo)

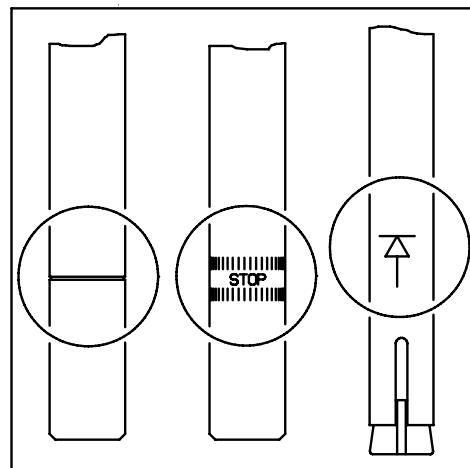



2.4 Ajustar las ruedas de soporte (bicicleta terapéutica)

Deberá aflojar el tornillo (con una llave Allen de 5 y otra llave inglesa de 13 mm), el cual se encuentra en el extremo inferior del puntal de suspensión.

Primero deberá sacar la tapa de plástico que cubre los dos tornillos. A continuación, afloje los tornillos.

Mediante el deslice hacia arriba y abajo de los tornillos del puntal de suspensión por la ranura (véase dibujo), podrá ajustar las ruedas hacia arriba o abajo hasta que estén en contacto con el suelo.

Una vez ajustado los puntales de suspensión, coloque las tapas de plástico en los tornillos y apriételes firmemente.

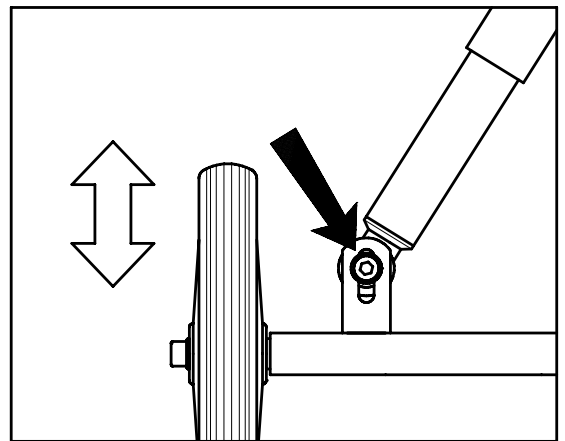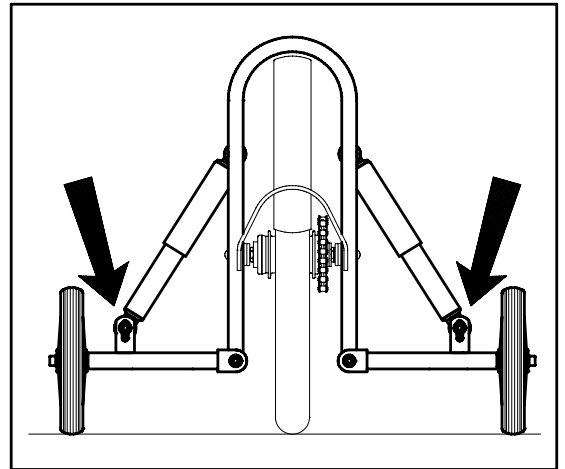


3. INSTALACION, AJUSTE Y USO DE LOS FRENOS

3.1 Uso de los frenos de mano/parada

En el lado izquierdo del manillar, se encuentra la palanca del freno de mano/parada.

La función de este freno es la misma que la de cualquier bicicleta común, excepto por una función adicional, la cual permite bloquear la bicicleta en una posición determinada. Para utilizar el freno de parada, el usuario deberá presionar el extremo del gatillo hacia abajo (véase dibujo).



Para soltar el freno de parada, deberá presionar la palanca de freno normal, la cual cosa soltará el gatillo.

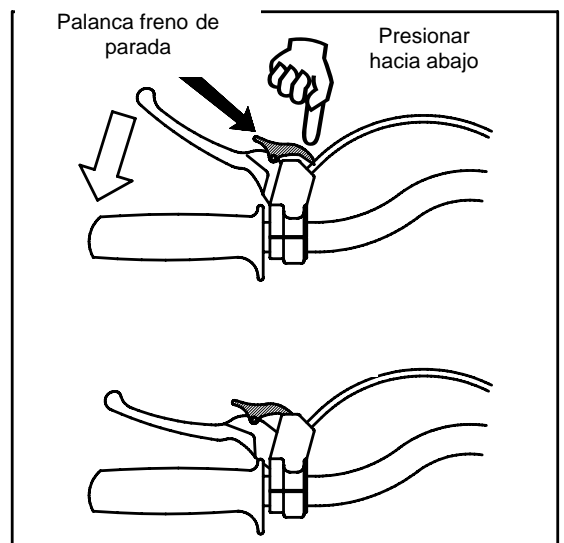


3.2 Montar y ajustar el freno de mano

Las pastillas del freno deben hacer un buen contacto con el aro de la rueda (que se encuentra en el mismo nivel) para que funcionen correctamente.

En el caso contrario, afloje las tuercas (véase flecha) y deslice el freno de pie hacia arriba y abajo hasta que esté en línea con el aro de la rueda. A continuación, apriete bien la tuerca. Repite el mismo proceso en el otro lado de la rueda.

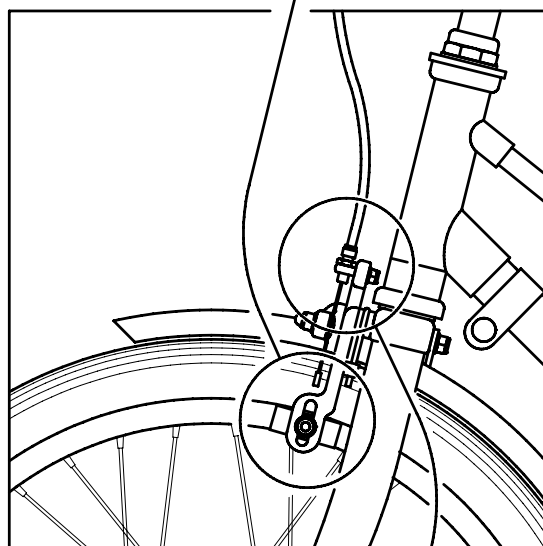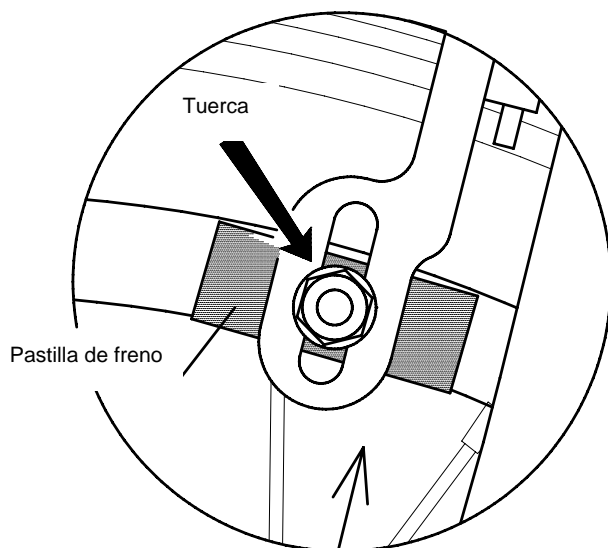

La distancia entre los frenos y el aro de la rueda debería ser aproximadamente de 2 a 3 mm, cuando los frenos no están en uso. Para cambiar esta distancia, deberá girar el tornillo de ajuste del freno (véase la flecha). Antes, deberá aflojar la tuerca de bloqueo (véase el dibujo). Una vez hecho el ajuste, asegúrese de apretar firmemente la tuerca de bloqueo.

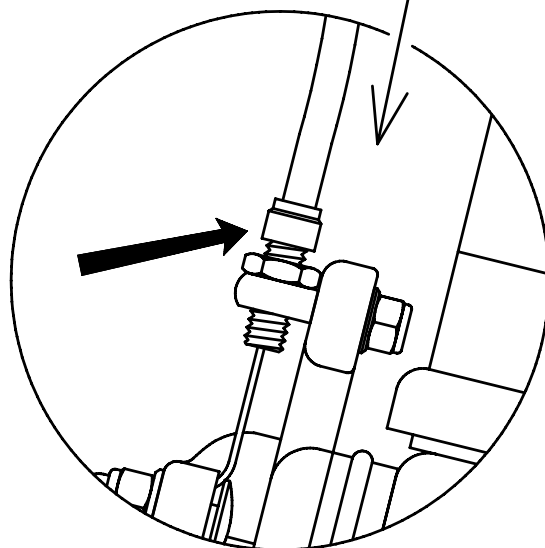

4. TRANSPORTAR EQUIPAJE O PASAJEROS

La cesta de la bicicleta puede cargar equipaje de un peso máximo de 10kg.

Aviso importante:

La bicicleta y triciclo terapéuticos, no están diseñados para transportar a una tercera persona. Consecuentemente, en caso de hacerlo, el fabricante no se hace responsable de los daños causados por tal mal uso.

5. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

La bicicleta y triciclo terapéuticos están diseñados para condiciones ambientales normales. Aún así, aconsejamos que evite una exposición a la humedad durante un período de tiempo largo.

Le recomendamos que limpie las bicicletas/triciclos de vez en cuando con detergentes normales para bicicletas, para prolongar su duración y asegurar un buen funcionamiento. También se debería limpiar la cadena de vez en cuando, aplicando algunas gotas de aceite para cadenas.


Asegúrese que se mantenga la presión de los neumáticos para asegurar una conducción cómoda y a la vez evitar que el usuario haga mucho esfuerzo. Léase la información técnica para saber la presión del aire correcta.

6. INFORMACION TECNICA

	12''		16''		20''		24''		26''
Medida neumáticos (cm)	32 x 6		41 x 4,5		51 x 4,5		61 x 4,5		66 x 4,5
ETRTO	62 – 203		47 – 305		47 – 406		47 – 507		47 – 559
Presión máx. (bares)	2		3		3		3		3
Peso aprox. bicicleta /triciclo (kg)	12 Bic.	14,5 Tric.	15,5 Bic.	17,5 Tric.	17,5 Bic.	19,5 Tric.	19,5 Bic.	22 Tric.	25,5 Tric.
Carga máx. cesta (kg)	10		10		10		10		10
Peso usuario máximo (kg)	30		50		65		100		100

7. GARANTIA Y CONDICIONES

1. Las deficiencias que pudieran detectarse deben ser notificadas en el plazo de una semana y por escrito, en caso contrario se considerará que la mercancía ha sido aceptada. Este plazo de una semana empieza en el momento que se reciba la mercancía por parte de la empresa distribuidora. En caso de daños provocados durante el transporte, será necesario informar inmediatamente a la empresa distribuidora.
2. Para cualquier distribución realizada de forma adecuada, respondemos con una garantía de 2 años, a partir de la fecha de entrega del producto. La garantía cubre todas las piezas dañadas o inutilizables por fallos en el material o en la fabricación demostrables, piezas que según nuestra valoración podrán ser reparadas o cambiadas de forma gratuita.
3. Se anula tal garantía en caso de cambios, alteraciones o reparaciones en los productos que haya hecho el comprador o terceros, sin nuestro previo consentimiento por escrito.
4. La garantía no cubre el producto del desgaste producido por su uso normal. Tampoco cubre aquellas piezas que por haber sido forzadas, maltratadas o usadas de forma inadecuada hayan sufrido daños.
5. Solamente se contempla la posibilidad de cambios de los derechos legales o reducciones en el precio, en el caso en que las reparaciones o el envío de piezas de recambio se hayan retrasado o hayan sido denegado por nuestra parte la reparación o dichos envíos bajo ésta garantía.
6. Esta garantía no cubre los gastos o responsabilidades en el caso de daños producidos en terceras personas que hayan usado el producto.

 Este producto es conforme a la
Normativa Europea 93/42/CEE