



ZEBRATM

TRONA DE POSICIONAMIENTO



CE



MANUAL USUARIO

Our passion - your independence!

AKCESMED



¡PRECAUCIÓN! El fabricante asume la responsabilidad por el uso correcto del dispositivo sólo cuando el producto se adquirió en un distribuidor autorizado de Akces-Med o en la tienda médica especializada!

¡PRECAUCIÓN! AKCES-MED Ltd. se reserva el derecho de introducir cambios técnicos y comerciales en el contenido de la instrucción sin previo aviso.



Los productos Médicos de primera clase de acuerdo con el Reglamento 93/42 / CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los productos médicos. Para este producto, el fabricante emitió la correspondiente declaración de conformidad. El número de identificación del productor está en el Departamento de Registro de Productos curativos, productos médicos y productos biocidas: PL / CA01 04088 / W

Akces-MED. Sp. Zoo. Compañía introducida el sistema de gestión de calidad ISO 13485 relativa a la producción, venta y servicio. El sistema está certificado por Det Norske Veritas.





CONTENIDO

1.	Propósito del manual	5
2.	Indicaciones de uso.....	5
3.	Características generales de la silla.....	6
3.1	Equipamiento estándar.....	6
3.2	Equipamiento adicional.....	7
4.	Tabla de medidas.....	10
5.	Descripción detallada de uso.....	10
5.1	Reposapiés.....	10
5.2	Asiento.....	11
5.3	Respaldo.....	12
5.4	Soportes de tronco.....	12
5.5	Chaleco.....	13
5.6	Taco abductor.....	13
5.7	Cinturón pélvico.....	13
5.8	Reposacabezas.....	14
5.9	Reposabrazos.....	15
5.10	Mesa.....	16
6.	Equipamiento adicional.....	17
6.1	Reposapiés 3D.....	17
6.2	Acolchado soporte piernas.....	17
6.3	Soporte de rodillas.....	18
6.4	Pantalón abductor.....	19
6.5	Mesa de terapia.....	19
6.6	Controles laterales y de cadera ajustables.....	19
6.7	Acolchado soporte nuca.....	20
6.8	Cinturón sujeción cabeza.....	20
7.	Ajustes de la silla en posición estirada.....	21
8.	Uso de la silla.....	24
8.1	Preparación del paciente.....	24
8.2	Cómo usar Zebra.....	25
8.3	Posición sentado.....	26
9.	Normas de seguridad.....	27
10.	Mantenimiento y limpieza.....	30





INTRODUCCIÓN

A lo que se refiere al proceso de rehabilitación, es muy importante para un niño con discapacidad que adopte una posición de sentada. Tiene un buen impacto tanto en psicomotor, así como el desarrollo mental de un paciente joven. Lo que es más, ejerce una influencia positiva en la vida del niño y su familia debido al hecho de que hace su vida más cómoda. La adopción de la posición de sentado por un niño, que es discapacitado y sufrió diversas enfermedades, se considera como etapa vital del proceso de rehabilitación.

En cuanto al desarrollo del niño, la posición de sedestación es una etapa muy importante que precede a la adopción de posición de pie. ZEBRA™ es un dispositivo universal que se creó con el fin de sentar a los niños que tienen el cuerpo flácido o sufren de espasticidad. Está hecho de madera y su acabado es de colores gracias a la cual los niños consideran este producto como un juguete, no como un dispositivo de rehabilitación.

Recuerde leer este manual del usuario. Usted encontrará no sólo información útil, sino también directrices sobre el uso seguro y eficaz del producto.

Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en contactar con su distribuidor oficial.



PRECAUCIÓN! Antes de usar el producto, el usuario está obligado a familiarizarse con el manual del usuario. Recuerde que seguir este manual es de vital importancia. Asegura la Seguridad y durabilidad del dispositivo.





1 PROPÓSITO DE ESTE MANUAL

El presente manual del usuario contiene información básica esencial para el uso apropiado, preparación, mantenimiento, limpieza y condiciones de garantía en relación con LA silla de posicionamiento ZEBRA™.

El manual de usuario debe mantenerse en un lugar fácilmente accesible. Está diseñado para las personas que cuidan de los niños con discapacidad, y por tanto los médicos, así como los fisioterapeutas que operan el dispositivo.



PRECAUCIÓN! Antes de usar el producto, el usuario está obligado a familiarizarse con este manual.

Recuerde que el cumplimiento de las directrices es muy importante. Asegura la seguridad y extiende la durabilidad, así como la estética del dispositivo.

2 INDICACIONES DE USO

La silla es un dispositivo individual que ayuda a niños que sufren de diversas enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, muscular o sistema esquelético. Se recomienda en los siguientes casos:

- Parálisis cerebral – diferentes formas.
- Meningocele.
- Lesiones espinales y de cerebro.
- Enfermedades musculares relacionadas con paresia y parálisis.
- Enfermedades genéticas relacionadas con paresias
- Otras enfermedades relacionadas con paresias, parálisis y lesiones del sistema locomotor.
- Después de lesiones cerebrales, de columna vertebral con la médula espinal y lesiones en extremidades inferiores.





3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SILLA

ZEBRA está disponible en 3 versiones:



ZEBRA



ZEBRA CLASSIC



ZEBRA INVENTO

3.1 Equipamiento estándar



1. Chasis con ruedas
Reposapiés con
2. estabilizadores de pie
3. Asiento
4. Respaldo
5. Taco abductor
6. Controles de tronco
7. Cinturón pélvico
8. Chaleco
9. Reposabrazos
10. Mesa
11. Reposacabezas ajustable
12. Pistón hidráulico (solo ZEBRA INVENTO)



3.2. Equipamiento adicional



Soporte de nuca



Funda reposacabezas



Cincha reposacabezas



Funda para mesa



Mesa con comunicador



Mesa terapèutica



Soporte de rodilla



Reposapiés 3D



Acolchado soporte piernas



Pantalón abductor



Controles laterales y de cadera ajustables



Chaleco 6 puntos



Arnés 4 puntos



Arnés en H



Cinturón de tronco





Cojín asiento elástico



Cojín respaldo elástico



Cojín asiento anatómico



Cojín asiento con taco anatómico




Reposacabezas largo





4 TABLA DE MEDIDAS

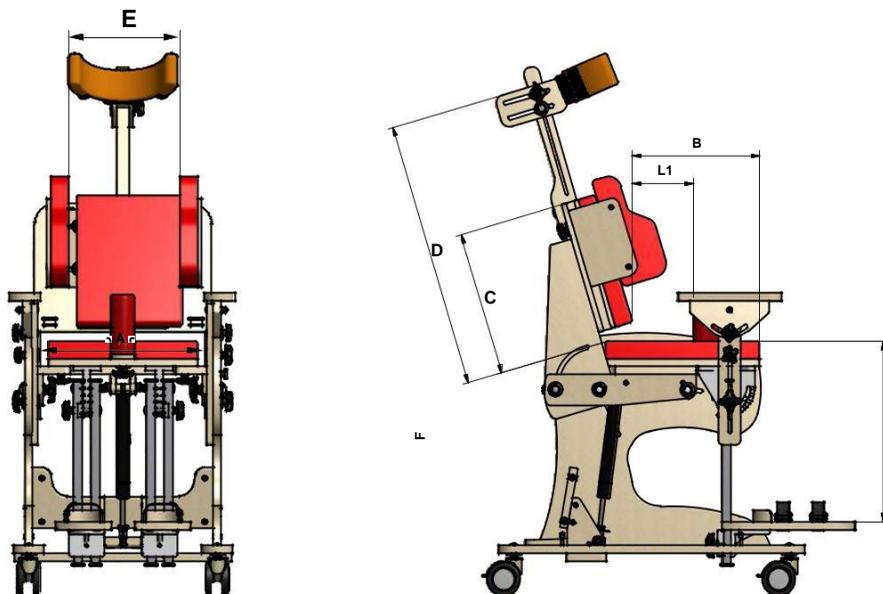

MEDIDAS		Talla 1	Talla 2	Talla 3*
A Ancho asiento	[cm]	34	37	50
B Profundidad asiento	[cm]	15-24	21-34	24-42
L1 Distancia asiento a taco abductor	[cm]	5-19	7-25	7-30
C Altura respaldo (sin reposacabezas)	[cm]	29	33	43
D Altura respaldo (con reposacabezas)	[cm]	40-60	45-66	49-69
E Altura respaldo	[cm]	14-21	18-27	22-38
F Altura reposapiés a asiento	[cm]	18-33	18-40	20-50
Largo de reposapiés	[cm]	19	22	25
Basculación (ZEBRA)	[°]	0-15	0-15	0-15
Basculación (ZEBRA INVENTO)	[°]	0-25	0-25	0-25
Reclinación respaldo	[°]	90-180	90-180	90-180
Inclinación reposapiés	[°]	0-90	0-90	0-90
Carga máxima	[kg]	25	45	60
DIMENSIONES DE PRODUCTO				
Ancho	[cm]	50	56	73
Largo	[cm]	82	100	105
Alto	[cm]	76	95	140
Peso	[kg]	14	20	34

*La talla 3 y sus accesorios de fabricante





5

COMO USAR LA SILLA



PRECAUCIÓN! Sólo el personal capacitado puede ajustar la silla de posicionamiento para el paciente!



Es necesario ajustar la silla de posicionamiento con las medidas del usuario antes de usar el producto. Es por eso que es importante para medir el paciente y ajustar el producto de acuerdo con estas medidas; toda la información en este capítulo se explica claramente cómo el producto debe ser ajustado

5.1. Reposapiés

5.1.1. Siga los siguientes pasos para regular la altura:

- Afloje los tornillos (fig.1)
Ajuste la altura a la necesidad.
- Apriete los tornillos.

5.1.2. Siga los siguientes pasos para ajustar el ángulo del reposapiés:

- afloje los tornillos situados al lado de cada reposapiés (fig.2),
- ajuste el ángulo a su necesidad,
- apriete los tornillos.



fig.2





5.2 Asiento

5.2.1. Siga los siguientes pasos para regular la profundidad del asiento:

- afloje los 4 y tornillos situados debajo del asiento (fig.3),
- ajuste la profundidad a su necesidad(fig.4),
- apriete tornillos.




5.2.2. Basculación

ZEBRA y ZEBRA CLASSIC

Siga los siguientes pasos para regular la basculación:

- afloje los tornillos (fig. 5),
- ajuste la basculación,
- apriete firmemente los tornillos.

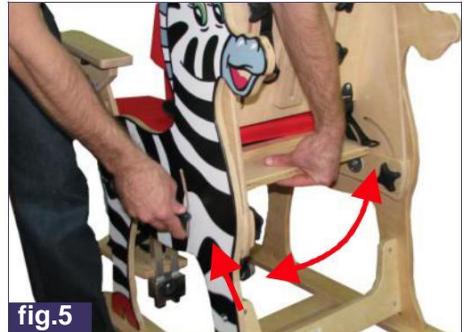

ZEBRA INVENTO

Siga los siguientes pasos para regular la basculación:

- presione el pedal situado a la parte posterior de la silla y al mismo tiempo ajuste la basculación a su necesidad (fig. 6),
- bloquee asiento y suelte el pedal





5.3 Reposacabezas

Siga los siguientes pasos para regular el ángulo de reposacabezas:

- Afloje los tornillos (fig.7),
- ajuste la inclinación a su necesidad (fig.8),
- apriete firmemente los tornillos.



5.4 Soportes de tronco

Siga los siguientes pasos para ajustar los soportes de tronco:

- tome las medidas del usuario,
- afloje los 4 tornillos (fig.9),
- ajuste los soportes en ancho y alto (fig.10),
- apriete los tornillos.





5.5 Chaleco

Siga los siguientes pasos para montar el chaleco:

- Coloque las 4 hebillas,
- Tire de las cinchas a fin de ajustar el chaleco.



fig.11

5.6 Taco abductor

Siga los siguientes pasos para ajustar el taco abductor:

- afloje el tornillo debajo del asiento (fig.12),
- mueva el taco abductor hacia adelante o hacia atrás (fig.13),
- apriete el tornillo.



fig.12



fig.13

5.7 Cinturón pélvico

Siga las siguientes instrucciones para montar el cinturón:

- encaje las dos hebillas,
- estiré de las cinchas para regular el tamaño





PRECAUCIÓN! Si el chaleco y el cinturón están montados debe tener en cuenta

- las hebillas no se desabrochan por presión
- Las hebillas no se desplazan por una colocación incorrecta

5.8 Reposacabezas

Siga los siguientes pasos para ajustar el reposacabezas:

- afloje los tornillos situados a ambos lados del reposacabezas
- Ajuste el reposacabezas,
- Apriete firmemente los tornillos.

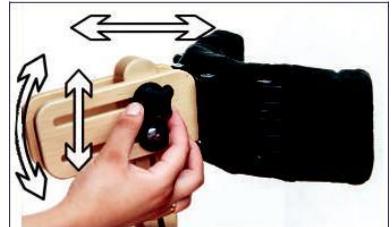


fig.16

A posterior, es importante:

- afloje los tornillos del borde superior de cada link con la ayuda de una llave allen (fig.17),
- ajuste la forma a la necesidad
- apriete firmemente los tornillos.



fig.17



5.9 Reposabrazos

Siga los siguientes pasos para regular la altura del reposabrazos:

- afloje los dos tornillos del soporte de reposabrazos (fig. 18,19),
- ajuste la altura a su necesidad (fig. 20),
- apriete los tornillos



fig.19

Siga los siguientes pasos para regular el ángulo de los reposabrazos:

- afloje los tornillos (fig.21),
- ajuste el ángulo a su necesidad
- apriete los tornillos



fig.18



fig.20



fig.21



5.10. Mesa

Siga los siguientes pasos para montar la mesa:

- afloje los tornillos situados debajo de la mesa,
- ajuste los reposabrazos a la misma altura
- encaje la mesa en los reposabrazos (fig.22),
- apriete los tornillos (fig.23).





6

EQUIPAMIENTO ADICIONAL

6.1 Ajuste reposapiés 3D, ^{REF}ZB_003

Siga los siguientes pasos para montar y regular el reposapiés :

- desmonte los reposapiés estándar,
- monte los reposapiés 3D en el mismo sitio que estaban situados los estándar
- ajuste el reposapiés a su necesidad
- apriete los tornillos



6.2 Acolchado soporte piernas, ^{REF}ZB_007

Siga los siguientes pasos para montar los soportes de rodillas:

- afloje los tornillos de cada cojín (fig.25),
- Ponga los cojines en los perfiles de reposapiés,
- ajuste la altura a su discreción
- apriete los tornillos (fig26).





6.3 soportes de rodillas, ^{REF} ZB_006

Por favor siga los siguientes pasos para montar los soportes de rodilla:

- Afloje los tornillos significativamente del mando situado en la parte delantera del bloque de abducción,
- inserte el soporte de rodilla (fig.27),
- Apriete los tornillos

Por favor siga los siguientes pasos para regular los soportes de rodilla:

- Afloje los tornillos de los soportes de rodillas (fig.28),
- Ajuste la distancia de los soportes a necesidad (fig.29),
- Apriete los tornillos

También es posible ajustar taco abductor. Si desea hacerlo, por favor, siga las instrucciones relativas en el (punto 5.6 página 13).



PRECAUCIÓN! El protector no sustituye al asiento ni a cualquier otro accesorio



6.4 Pantalón abductor, ^{REF} ZB_010

El pantalón abductor viene montado por el fabricante.

Siga los siguientes pasos para ajustarlo:

- Ajuste la largada a la necesidad,
- Cierre las hebillas



PRECAUCIÓN! Si el chaleco y el cinturón pélvico están montados debe cerciorarse de:

- Que las hebillas no se suelten al tirar
- Que las hebillas no estén conectadas en su lugar

6.5 Mesa terapéutica, ^{REF} ZB_005

La mesa terapéutica se monta en el mismo sitio donde va la mesa estándar. Si quiere montarla por favor siga las instrucciones del punto 5.10

Controles laterales y de cadera ajustables

Los controles laterales y de cadera ajustable ^{REF} independientemente vienen montados del fabricante. Siga los siguientes pasos para ajustarlos

- tome medidas del usuario
- afloje los tornillos,
- ajuste la distancia con las medidas tomadas
- mueva los controles hacia arriba y hacia al lado cuanto sea necesario,
- Apriete los tornillos si la altura es correcta





6.7 Acolchado soporte nuca, ^{REF} ZB_004

Siga los siguientes pasos para montar los acolchados soporte nuca:

- z Ponga el soporte en la barra de reposacabezas,
- z Ajuste la altura y profundidad a necesidad (fig.33),
- z Apriete el tornillo para fijar (fig.34).



6.8 Cinturón sujeción cabeza, ^{REF} ZB_001

Siga los siguientes pasos para montar el cinturón sujeción cabeza:

- sujete la cincha a los laterales del reposacabezas con la ayuda del velcro, ajuste la longitud de las cinchas al paciente (fig.35),
- tirar de las cinchas con el fin de comprobar si están montadas correctamente.





7 AJUSTAR LA SILLA PARA ESTIRARSE



Es necesario colocar bien los dos pies, así como del respaldo en posición vertical.

7.1 Soportes de rodilla en posición estirada

El soporte de rodilla en posición estirada se sitúa por encima del taco abductor, recuerde que es ajustable para regularlo a su necesidad



fig.37



fig.38



fig.39

c) Ajuste la altura del soporte de rodilla con el tornillo situado debajo del asiento






7.2 Ajuste de basculación en posición estirada

ZEBRA INVENTO

Siga los siguientes pasos para regular la basculación de **ZEBRA INVENTO** en posición estirada:

- Libere el pestillo en posición vertical al lado del producto
- Al mismo tiempo presione el pedal y Ponga en posición horizontal suavemente
- Libere el mandril de cierre,
- ajuste la basculación a su necesidad
- bloquee el asiento y suelte el pedal

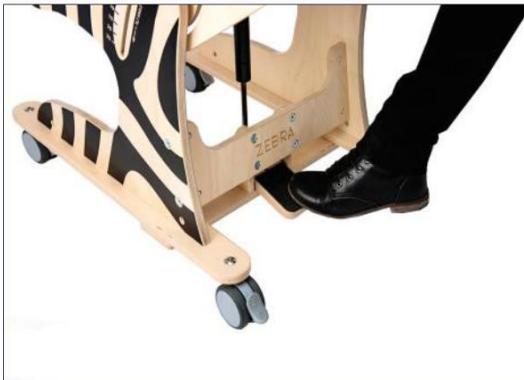



ZEBRA, ZEBRA CLASSIC

Siga los siguientes pasos para ajustar en ZEBRA y ZEBRA CLASSIC la basculación en posición horizontal:

- afloje los dos tornillos situados al lado del producto,
- con la otra mano ajuste la basculación a su necesidad,
- vuelva a apretar los tornillos.



PRECAUCIÓN! Es muy importante asegurarse que el asiento ha quedado bloqueado. Asegúrese que el asiento no se mueve al presionarlo!



8 EL USO DE LA SILLA



PRECAUCIÓN! ZEBRA™ debe ser utilizada con el cumplimiento de las directrices incluidas en este manual de usuario. Recuerde que debe utilizar el producto con alguien que está entrenado y bien informado.

8.1. Preparación del paciente

Antes de usar el producto es necesario asegurarse de::

- la ropa del paciente es ligera y cómoda
- Los zapatos deben ser cómodos y sujetar el tobillo
- Debido a razones de higiene y para evitar la abrasión, es aconsejable que el paciente vaya vestido cuando se utiliza el dispositivo, la piel no debe estar desnuda en especial en los lugares de contacto con la tapicería,
- Los drenajes, bolsas, catéteres, etc., deben estar asegurado para funcionar correctamente y que no moleste durante el uso del producto,

PRECAUCIÓN! La ropa debe proteger la piel del paciente del contacto directo con la tapicería, así como otras partes del producto.

¡PRECAUCIÓN! Sólo el médico puede tomar una decisión en relación con el uso de cualquier tipo de suministro ortopédica!





8.2. Cómo usar la silla

1. Antes de usar el necesario:

- Despliegue el dispositivo
- Ponga el dispositivo en un suelo liso
- Asegúrese de que todas las piezas estén en servicio, montado y estable correctamente
- accione los frenos
- Ajustar el dispositivo a las medidas del paciente
- Desabroche chaleco, cinturones de tronco, etc. para colocar fácilmente el paciente en el dispositivo
- Coloque al paciente en el dispositivo
- Fijar todos los elementos que estabilizan paciente, por ejemplo, chaleco, cinturón de tronco, la estabilización de los pies cinturones etc
- Monte equipo el equipamiento adicional



PRECAUCIÓN! Recuerde asegurarse que todas las correas están correctamente ajustadas y apretadas. Compruebe también si fijaciones de los elementos ajustables están bien apretados!

El equipo funciona correctamente sólo cuando el dispositivo se ajusta de acuerdo a la altura y peso del paciente. Recuerde tomar todas estas mediciones antes de comprar el producto. El ajuste correcto es el más importante debido al hecho de que sólo entonces el producto es seguro. Está prohibido forzar al niño que mantenga una posición específica porque se sentirá incómodo y puede llevar a la postura incorrecta.



8.3. Posición sentada

Por lo general la primera posición sentada ocurre en rehabilitación, neurología, neurocirugía o la sala de ortopedia. La bipedestación es supervisada por el médico y el fisioterapeuta debido a la posibilidad de que se produzca algún tipo de problema médico como: pérdida de la conciencia, descenso de la presión arterial, etc. Es muy importante ajustar todas las partes del dispositivo a la condición del niño, teniendo en consideración las contracturas y deformaciones.

En su casa el niño debe estar supervisado por personal cualificado (fisioterapeutas, enfermeras, miembros capacitados de la familia).



PRECAUCIÓN! El ajuste incorrecto del dispositivo puede dar lugar a efectos secundarios tales como: desmayos, deformidades del cuerpo, la sobrecarga de las articulaciones. Es muy recomendable ajustar el dispositivo antes de cada uso. Este ajuste tiene que ser hecho solamente por una persona o un terapeuta entrenado. Si aparece alguno de estos efectos secundarios, es necesario ponerse en contacto con el médico. Si estos efectos secundarios desaparecieron, recuerde que debe informar a médico con el fin de tomar una decisión en relación con el proceso.





9 NORMAS DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN! ZEBRA debe utilizarse tal como explica este manual del usuario.

Es muy importante consultar ya sea médico o fisioterapeuta con el fin de tomar la decisión correcta en relación con la elección de la silla y su tamaño. También es esencial para familiarizarse con las directrices que se describen en el manual del usuario antes de utilizar el dispositivo. Es muy importante consultar ya sea médico o fisioterapeuta con el fin de tomar la decisión correcta en relación con la elección de la silla y su tamaño. También es esencial para familiarizarse con las directrices que se describen en el manual del usuario antes de utilizar el dispositivo.

1. Antes de usar es necesario:

- Asegurarse de que no hay daños o diferentes fallos que podrían poner en peligro la vida del paciente; comprobar si todas las partes están trabajando y están montados correctamente y, por otra parte, comprobar si no se rompen;
- Comprobar si todos los tornillos, perillas y todas las partes pegadas, cosidas o roscados están apretados;
- Comprobar si los frenos están funcionando correctamente;
- Comprobar si hebillas están funcionando correctamente;
- Utilizar siempre los cinturones de seguridad, cintas de velcro deben superponerse min. 8 cm;
- Ajustar el dispositivo de acuerdo con las medidas del paciente y las necesidades, por ejemplo, el ajuste de soportes, reposapiés, etc. ;
- Asegurarse de que todas las partes móviles y las perillas de ajuste son estables y bloqueada;
- Asegure al usuario con la ayuda chaleco, cinturón, soportes, taco abductor, reposacabezas. Es muy importante asegurar al usuario para evitar que se caiga.



2. Está prohibido utilizar la silla para diferentes propósitos por lo que se han fabricado.
3. Está prohibido utilizar la silla si está rota o falta algún elemento.
4. Está prohibido dejar al usuario sin atender.
5. Solo se debe usar la silla si hay una persona entrenada y competente
6. Está prohibido dejar la silla con el paciente en suelo inestable aun con los frenos accionados
7. Está prohibido subir o bajar escaleras.
8. El usuario no se debe apoyar en el reposapiés para entrar y salir de la silla
9. Es importante accionar el freno en el proceso de entrada y salida de la silla
10. Asegúrese que las extremidades no interfieren en ningún elemento que se pueda ajustar
11. Aunque el dispositivo y la tapicería están hechos de materiales resistentes al fuego, por favor, preste atención al acercarse a las fuentes de fuego o fuentes de alta temperatura durante el uso del dispositivo. Por otra parte, la silla no debe almacenarse en habitaciones con mucha humedad.
12. Asegure la silla durante el transporte con el fin de evitar posibles daños. El fabricante no se hace responsable de los daños que aparecieron debido a la preparación inadecuada del dispositivo durante el transporte.



PRECAUCIÓN! La primera vez que se pone el usuario en sedestación por lo general ocurre en rehabilitación, neurología, neurocirugía o la sala de ortopedia. Es supervisado por el médico y el fisioterapeuta debido a la posibilidad de que se produzca este tipo de problemas médicos como: pérdida de la conciencia, descenso de la presión arterial, etc. Es muy importante ajustar todas las partes del dispositivo a la condición del niño, teniendo en consideración las contracturas y deformaciones.



PRECAUCIÓN El producto contiene piezas pequeñas que los niños pueden tragar.

¡PRECAUCIÓN! Está prohibido realizar cualquier cambio en relación con la estructura de la silla debido al hecho de que es peligroso y que se traduce en pérdida de garantía.

¡PRECAUCIÓN! El peso de usuario no debe ser más grande que el peso máximo descrito en la página 9,
¡PRECAUCIÓN! Este dispositivo debe ser utilizado dentro de los edificios!



-
- 1) Akces-MED Sp. z. o. o vende productos libres de defectos o fallos de fabricación.
 - 2) El fabricante da 24 meses de garantía desde la fecha de compra. Todos los defectos revelados durante el periodo de garantía serán reparados de forma gratuita.
 - 3) Todos los defectos detectados después de período de garantía puede ser reparado sólo cuando el usuario va a pagar por ello.
 - 4) El fabricante afirma que el producto se puede utilizar 36 meses. El usuario puede utilizar este producto después de este período sólo cuando pase una revisión que confirme el buen estado. A continuación, el fabricante determina de nuevo el tiempo que el producto puede ser utilizado y, por otra parte, se determinará la fecha de la próxima revisión.
 - 5) Si el producto está dañado, por favor, póngase en contacto con su distribuidor.



10 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Zebra debe mantenerse limpia y utilizarse en conformidad con las recomendaciones del fabricante. Se debe mantener en sitio limpio, seco y ventilado. El mantenimiento y la limpieza deben realizarse al menos una vez al mes. La limpieza y mantenimiento de la silla son indispensables para mantener su correcto funcionamiento, así como su seguridad.

Es muy recomendable recordar de hacer un mantenimiento adecuado a fin de ampliar la estética del producto. Con el fin de hacer eso, es imprescindible tener en cuenta las siguientes pautas:

1. Se recomienda limpiar la tapicería con un producto de limpieza, esponja suave y agua tibia. Si utiliza una esponja demasiado húmeda, la mancha puede aumentar de tamaño y la tapicería puede ser destruida. Es necesario recordar que el exceso de humedad se debe quitar de la tela antes de la siguiente limpieza. Por favor enjuague tapicería con agua tibia y un trapo limpio una vez que desaparezca la mancha.
2. Está prohibido empapar la tapicería!
3. Está prohibido limpiar la tapicería con la ayuda de cepillos duros.
4. Está prohibido limpiar la tapicería con agentes químicos fuertes tales como disolventes químicos o cáusticos.



PRECAUCIÓN! Akces-MED Sp z o. o no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso de la cámara de compensación mal.

5. Está prohibido empapar la tapicería. Recuerde que la tapicería tiene que estar siempre seca antes de usar.
6. Está prohibido limpiar o hacer cambios durante el uso de la misma.
7. Todo el metal, así como elementos de plástico se deben limpiar a mano con la ayuda de productos de limpieza en general.





PRECAUCIÓN! Recuerde que la tapicería debe estar siempre seca antes de usar!

Antes de usar es necesario:

- limpie ruedas
- Comprobar si la base y las ruedas están montadas correctamente
- Asegurarse de que todas las piezas de madera, por ejemplo, la bandeja no tiene astillas;
- Comprobar que la silla está libres de roturas o cualquier tipo de deformidades.
- Comprobar si todas las partes móviles están trabajando y todos los tornillos, tuercas, etc. y que las perillas se aprietan correctamente;
- Comprobar si los cinturones, chalecos, cinturones tronco, l cinturones, etc. no son deshilachados; comprobar si hebillas y pinzas funcionan correctamente

PRECAUCIÓN! El fabricante asume la responsabilidad sólo por vicios ocultos o daños que aparezcan a pesar del hecho de que el usuario cumple con las directrices.

¡PRECAUCIÓN! En caso de cualquier daño, es imprescindible ponerse en contacto con la persona que le vendió el producto.





FABRICANTE DISPOSITIVOS ORTOÉDICOS



Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955B 36-


002 Jasionka tel.

(17) 864 04 77

www.akces-med.com e-

mail: export@akces-med.com

Distribuidor Autorizado

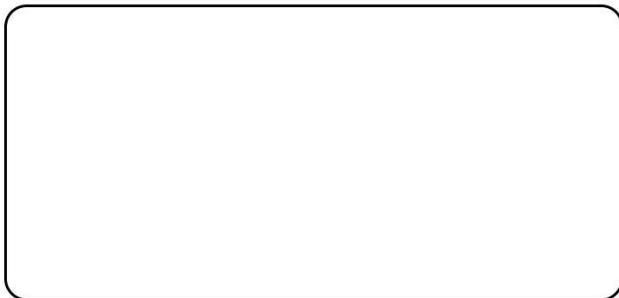

Fecha
expedición:

18.12.2011

Última revisión:

16.10.2015

Our passion - your independence!