



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia


Asiento giratorio de aluminio

AD536alu.

<https://www.ayudasdinamicas.com/asiento-giratorio-de-aluminio--/>



Vídeo disponible en
ayudasdinamicas.com

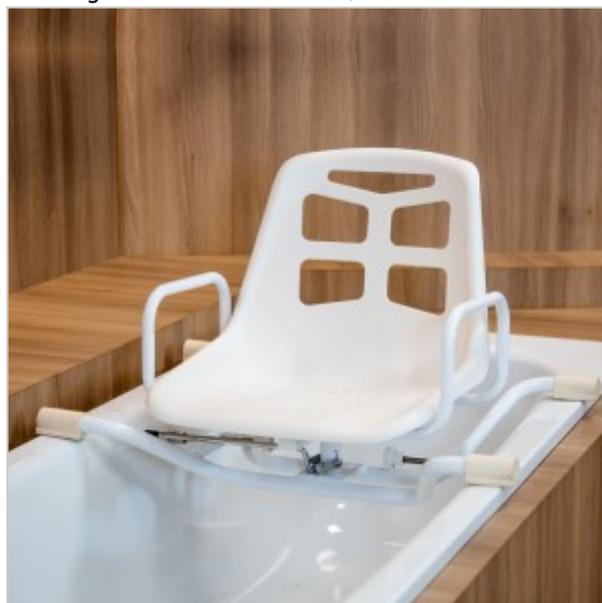

Descripción

De construcción robusta, fabricado en acero inoxidable y recubrimiento epoxi en color blanco, no requiere mantenimiento y se puede separar en dos piezas para facilitar su almacén o transporte. El asiento queda emplazado firmemente en la bañera, sin requerir obras ni fijaciones y se puede retirar al instante para usar la bañera normalmente. La seguridad del asiento es muy importante; lleva reposabrazos integrados y una palanca con 4 posiciones que puede bloquear el giro del asiento para mayor seguridad al entrar y salir. Su diseño impide deslizamientos y evacúa el agua.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



El usuario se sienta en el asiento que queda bloqueado (cada 90°) para que no gire involuntariamente. Los brazos pueden ser una ayuda adicional.



El cuidador, que solo tiene que soportar el peso de las piernas, hace girar el asiento cómodamente dentro de la bañera.



La persona está ahora cómodamente sentada en el interior de la bañera.



total máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD536ALU
ANCHO ASIENTO	36,5 cm
FONDO ASIENTO	34 cm
ALTO RESPALDO	40 cm
ANCHO E/BRAZOS	46 cm
ANCHO TOTAL	70 cm
FONDO TOTAL	55 cm

