



APEX MEDICAL S.L.  
Calle Elcano 9, planta 6  
48008, Bilbao, Vizcaya, España  
info@apexmedical.es  
+34 944 70 64 08



Vol 1.0

\*Este dispositivo está destinado a proporcionar movilidad a las personas que tienen dificultades para hacerlo por sí solas.



# Muévete más. Vive mejor.

Descubre el mundo con la Model C2 y vive la vida sin obstáculos.

Productos innovadores creados para facilitar la movilidad en tu día a día.

## WHILL Model C2





## Práctica

La Model C2 es fácil de manejar y puede realizar giros cerrados, para llevarte donde necesites



La cesta esta ubicada debajo del asiento, permite guardar objetos con mayor facilidad.

Dimensiones: 24 cm x 29 cm x 43 cm



Levanta el reposabrazos para sentarte facilmente desde un lado. Apóyate en el reposapiés para mayor estabilidad.



Explora con la Model C2, puede realizar giros cerrados, lo que le permite llegar donde otros no llegan.



Enciende la silla y ajusta la velocidad con una sola mano. Frenará automáticamente cuando sueltes el joystick, incluso en una pendiente.





## Todoterreno

Descubre su versatilidad: vive la vida que siempre has deseado con la Model C2.


¡Sal y diviértete!



Con sus dos potentes motores y sus grandes ruedas omnidireccionales delanteras, puedes superar sin esfuerzo obstáculos de hasta 5 cm de altura.



La suspensión de las ruedas traseras absorbe las vibraciones del pavimento cuando se conduce.

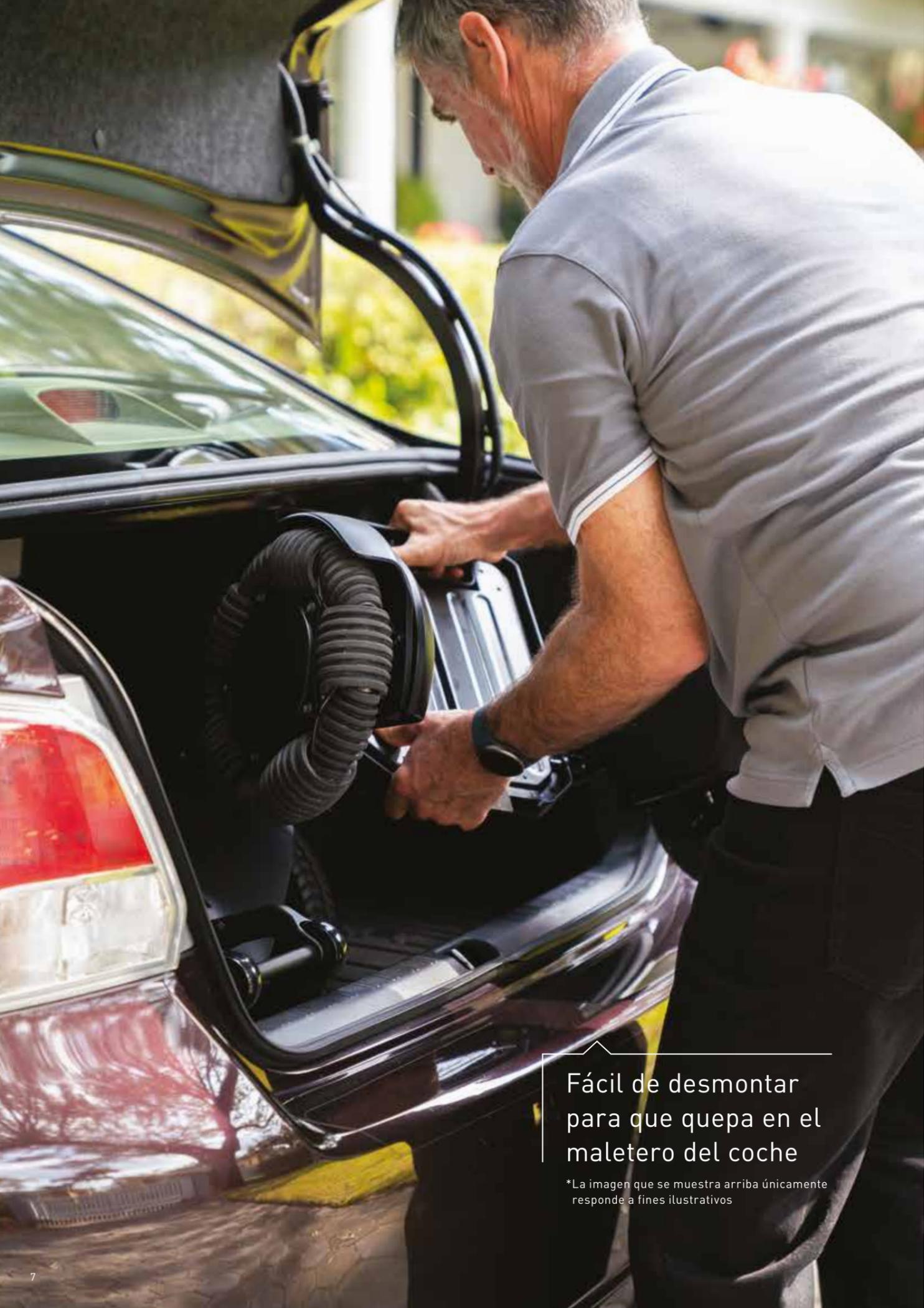

Fácil de desmontar para que quepa en el maletero del coche

\*La imagen que se muestra arriba únicamente responde a fines ilustrativos

## Portátil

La Model C2 se puede desmontar para transportarla cómodamente en el maletero de cualquier vehículo. Ya sea estando de compras o de viaje con la familia, la Model C2 te permite vivir la vida al máximo.



1 Quita la batería.



2 Tira de la palanca situada debajo del asiento.



3 Tira del asiento hacia arriba.



4 Tira de la palanca del lateral de la batería para separar las dos partes del chasis.



## Variedad de colores

Conduce con estilo.

Elije entre 8 colores de carcasa diferentes y personaliza la Model C2 para que se adapte a tu estilo.



Blanco



Gris\*



Negro



Rojo



Rosa



Morado\*



Dorado

\*Color de edición limitada

# ¡Hemos pensado en todo!

Las opiniones de nuestros clientes nos han ayudado a crear la Model C2. Hemos integrado todas las funciones que necesitabas como el bloqueo remoto y el ajuste de la velocidad máxima para una mayor seguridad.

Fácil de bloquear



Llave inteligente  
Bloquea el vehículo de forma remota.

Luces traseras



Las luces traseras te hacen visible en cualquier situación, incluso si cuelgas una mochila en el respaldo.

Siéntete seguro conduciendo por la noche

Evita deslizamientos



Conduce con seguridad por pendientes.

El joystick puede colocarse al lado izquierdo o derecho.



Batería  
Batería extraíble.



5

horas de carga

2,7 kg

La batería es extraíble y puede cargarse en cualquier lugar.




Todo el control en tu mano.

Aplicación



Verifica el kilometraje total, distancia recorrida, nivel de batería, ciclos de carga completos y más opciones con la aplicación de WHILL\*. También puedes bloquear y desbloquear la silla.

\*Debes instalar antes la aplicación.

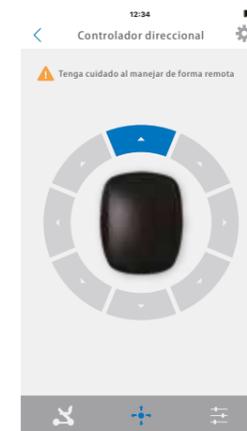


Desde la aplicación y a través de la pantalla del móvil, puedes controlar la silla de forma remota



Establece el modo de conducción a «Eco», «Normal» o «Sport» según tus necesidades.

## Medidas

En la Model C2 pueden ajustarse desde la altura del asiento y el ángulo del respaldo hasta la posición del joystick (a la derecha o izquierda) para crear una experiencia de conducción única.

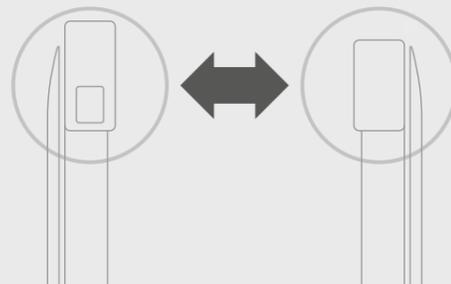

El joystick puede colocarse al lado izquierdo o derecho.

1. Altura del joystick ..... 670, 690, 710, 730 mm
2. Ángulo de soporte del respaldo ..... 90, 95, 100°
3. Altura del respaldo ..... 340 - 460 mm
4. Altura del asiento ..... 405, 425, 445, 465, 485 mm
5. Ángulo del asiento ..... 5°
6. Profundidad del asiento ..... 400 mm
7. Ancho del asiento ..... 400 mm
8. Ángulo del reposapiés ..... 2°
9. Altura del reposapiés ..... 127 mm

Aviso: Cuando uses tu propio cojín, asegurate de usar uno que sea retardante al fuego

## Especificaciones

Velocidad máxima ..... 8 km/h  
Motores ..... Dos

Capacidad de inclinación ..... 10°  
Radio de giro ..... 760 mm  
Superación de obstáculos de ..... 50 mm  
Sistema de frenado ..... Electromagnético  
Capacidad máxima de peso ..... 136 kg

Largo total  
(incluido el reposapiés): ..... 985 mm  
Ancho total: ..... 554 mm  
Alto total: ..... 745 - 945 mm

Medidas del asiento  
Largo: ..... 570 mm  
Ancho: ..... 550, 600, 650 mm  
Alto: ..... 480 mm

Medias chasis trasero  
Largo: ..... 590 mm  
Ancho: ..... 554 mm  
Alto: ..... 300 mm

Medidas chasis delantero  
Largo: ..... 720 mm  
Ancho: ..... 554 mm  
Alto: ..... 270 mm

Tipo de ruedas delanteras: ..... Ruedas omnidireccionales  
Tipo de ruedas traseras: ..... Neumáticas antipinchazos

Otras especificaciones

Tiempo de carga ..... 5 horas  
Batería ..... De litio ..... (25,3 V x 10,6 Ah)  
Ciclos de carga de la batería ..... ~1.000  
Batería Wh ..... 269 Wh  
Temperatura de uso ..... -15 - 40 °C  
Meddas de cojines ..... 400 mm x 400 mm ..... 450 mm x 450 mm  
Luces traseras ..... Luz LED (roja)  
Claxon ..... Incorporado, nivel de ruido > 65dB  
Clase de silla de ruedas ..... A



\*No utilices la silla como un asiento en un coche o en cualquier otro vehículo.

\*La silla puede transportarse por vía terrestre y aérea.

## Accesorios

Disponibles diferentes accesorios para una mayor personalización



Carcasas

Puedes cambiar el color de tu Model C2 eligiendo entre los ocho colores disponibles.

Par izquierdo y derecho.



Cinturón

Estabiliza a la persona en posición sentada incluso en pendientes.



Batería

Ligera de 2,7 kg puede utilizarse como batería de repuesto.



Llave inteligente

Bloquea y desbloquea el dispositivo de forma remota.



Cargador de batería

Un magnífico complemento para una batería de repuesto.



Funda protectora

Protege la Model C2 del polvo y de la suciedad cuando se almacena al aire libre\*.

\*No es resistente al agua. No la utilices para protegerte de la lluvia.



Porta bastones

Los batones en forma de T, los bastones de tipo muleta y las muletas pueden fijarse al chasis.



Joystick

Fácil manejo con una sola mano.



Muévete más.  
Vive mejor.

