

improving people's lives

We are a
G R O W T H
Company.



ATTITUDE

 **SUNRISE**
MEDICAL.



- ✓ 3 versiones: manual, híbrida, eléctrica
- ✓ Sistema de anclaje rápido, sencillo y ligero
- ✓ Disponibles en 31 colores
- ✓ Fácil de mover y retirar
- ✓ Diseñadas para sillas QUICKIE con reposapiés fijos

¿Cuál es tu Attitude?

Manual



¿Cuál es tu Attitude?

Híbrida



¿Cuál es tu Attitude?

Eléctrica



Attitude Manual - la deportiva

Para usuarios activos que quieren recorrer largas distancias en su propia silla de ruedas

Ideal para ponerse en forma ejercitando los músculos y mejorando la fuerza, resistencia y actividad cardiaca



- ✓ Cambio DUAL Drive de SRAM
- ✓ 3 x 10 velocidades
- ✓ Mando de cambio Trigger SRAM X5
- ✓ Frenos de discos de 160 mm
- ✓ Freno de estacionamiento
- ✓ Rueda 20"
- ✓ Bielas en V
- ✓ Empuñaduras ovaladas o redondas
- ✓ Guardabarros
- ✓ Luz delantera y trasera para silla
- ✓ Cuentakilómetros
- ✓ 31 colores
- ✓ Peso total: 14,5 kg



Attitude Híbrida - la todoterreno

Combina los beneficios físicos del handbike manual con la comodidad de la asistencia eléctrica.

Con motor para aquellos tramos más complicados, o cuando se necesite una ayuda extra de velocidad



- ✓ Casette de 10 velocidades
- ✓ Mando de cambio Trigger SRAM X5
- ✓ Frenos de discos de 160 mm
- ✓ Velocidad máxima 23 km/h
- ✓ Batería de litio – ion 14.5 Amph
- ✓ Freno de estacionamiento
- ✓ Rueda 20"
- ✓ Bielas en V
- ✓ Empuñaduras ovaladas o redondas
- ✓ Guardabarros
- ✓ Luz delantera y trasera para silla
- ✓ Pantalla 2.4 " Neodrives
- ✓ 31 colores
- ✓ Peso total: 21,5 kg



Attitude Eléctrica - la más potente

Máxima potencia en recorridos largos

Ideal para superar todo tipo de terrenos, con la máxima velocidad



- ✓ Velocidad máxima 23 km/h
- ✓ Frenos de discos de 160 mm
- ✓ Batería de litio – ion 13.4 Amph
- ✓ Freno de estacionamiento
- ✓ Rueda 16"
- ✓ Guardabarros
- ✓ Luz delantera y trasera para silla
- ✓ Pantalla LCD 2.4 " Ansmann
- ✓ 31 colores
- ✓ Peso total: 15.3 kg

Sistema de anclajes


Sistema de anclaje de 4 puntos que permite acoplar y desacoplar la silla en cuestión de segundos

Rápido – Seguro - Firme



[Play >>](#)


Sistema de anclajes

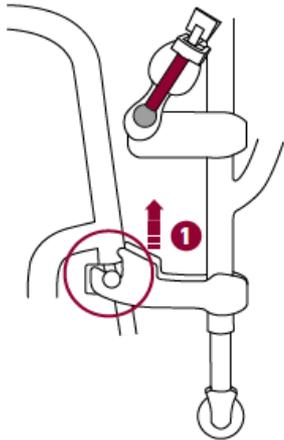

1

Asegúrate de que la abrazadera superior de la handbike esté levantada.
Frena la silla y acerca la handbike hasta que los anclajes de la silla encajen en los receptores inferiores de la handbike


Empuja hacia arriba y hacia adelante la handbike, hasta que las ruedas de la silla y las ruedas de apoyo de la handbike se levanten del suelo

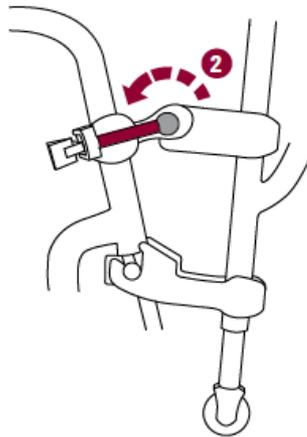

2

Gira hacia abajo la abrazadera superior

Baja la handbike hasta que la abrazadera quede en contacto con la silla

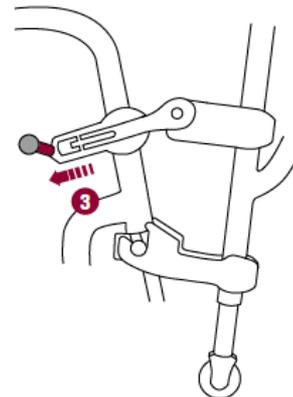

3

Tira de la palanca roja de bloqueo hacia atrás

Lista en cuestión de segundos!!



Sistema de anclajes

- Una vez retirada, sólo quedan dos anclajes en el armazón frontal de la silla
- Sin piezas que interfieran con las rodillas
- Amplio espacio para los pies y piernas
- Con ajuste en anchura 2 cm (sacando los tubos hacia fuera)
- Distintas posiciones para anclajes superiores e inferiores, que permiten alejar o acercar la handbike a la persona



¿Qué color vas a elegir?



Disponibles en más de 30 colores!

Escoge el que mejor se adapta a tu estilo propio...y
preparate a quemar la ciudad con tu estilo Attitude!!



Fácil de mover y retirar



Gracias a su empuñadura ergonómica y a las ruedas de apoyo resulta muy fácil moverla o retirarla, incluso con una sola mano



Tipos de cubiertas



Schwalbe Jumpin Jack

- Estilo mountainbike
- Disponible para las 3 versiones



Schwalbe Marathon Plus Evolution

- Tour
- Disponibles para Attitude Manual e Híbrida



Schwalbe Big Apple

- Tour
- Disponible sólo para Attitude Eléctrica

Cambios - Attitude Manual



- Cambio de serie **DUAL DRIVE** de SRAM (3 x 10 velocidades)
- Pedalier con 3 cambios integrados
- Casette de 10 velocidades



- Trigger SRAM X5 de serie
- Se maneja con un dedo
- 2 palancas – una para subir y otra para bajar
- Permite subir varias velocidades a la vez (pulsación más corta o larga)



- Grip Shift (opcional)
- SRAM X0
- Se maneja con giro de muñeca



Cambios - Attitude Manual



Opción:

- Buje con cambio integrado de 8 velocidades
- Con freno contrapedal interno (freno coaster)
- Sólo puede ir con el mando Grip Shift

Cambios - Attitude Híbrida



- Cassete de 10 velocidades

Mandos de cambio:



- Trigger SRAM X5 de serie
- Se maneja con un dedo
- 2 palancas – una para subir y otra para bajar
- Permite subir varias velocidades a la vez (pulsación más corta o larga)



- Grip Shift (opcional)
- SRAM X0
- Se maneja con giro de muñeca



- Universal SRAM Double Tap (opcional)
- Se maneja con un dedo
- 1 palanca – hacia delante (subir) hacia atrás (bajar)

Bielas y empuñaduras - Attitude Manual e Híbrida



Bielas en forma de V

- Posición más cómoda y ergonómica para los brazos
- No interfiere con las piernas, por ejemplo en curvas

Empuñaduras ovaladas

- A 25°
- dos diámetros: 37 x 21 mm ó 47 x 23 mm
- Aluminio



Empuñaduras redondas

- A 10°
- dos diámetros: 30 ó 40 mm
- Composite



Opciones tetra

- Para empuñaduras redondas
- A 10°
- Diámetro de 30 mm
- Soporte de mano o de brazo



Frenos



Frenos de disco

- 160 mm de diámetro
- Con 1 palanca de accionamiento manual de serie en todas las versiones
- Opción de dos palancas de accionamiento – sólo para versión manual e híbrida



Freno de estacionamiento

- Freno de disco
- Fácil de bloquear
- De serie en todas las versiones



Freno contrapedal (coaster)


- Se frena girando las empuñaduras hacia atrás
- Sólo para versión manual e híbrida



Batería - Attitude Híbrida



- Batería de litio-ion de 14,5 Amph
- Sin efecto memoria (si se hacen cargas parciales, la batería no coge “vicios” y carga hasta el 100%, sin reducir su capacidad)
- Con indicador de carga
- Llave de bloqueo (evita que se pueda quitar la batería, la bloquea en su sitio)
- Botón on/off de encendido y apagado
- Modo activo o stand-by para evitar descargas
- 2 años de garantía
- Cargador de serie
- Opción de batería y cargador adicional

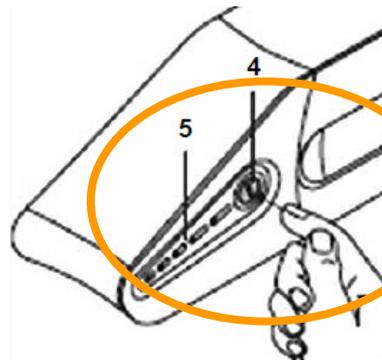


Botón on/off e
indicador de carga



Consulta siempre el manual de instrucciones previo uso de tu handbike


Batería - Attitude eléctrica

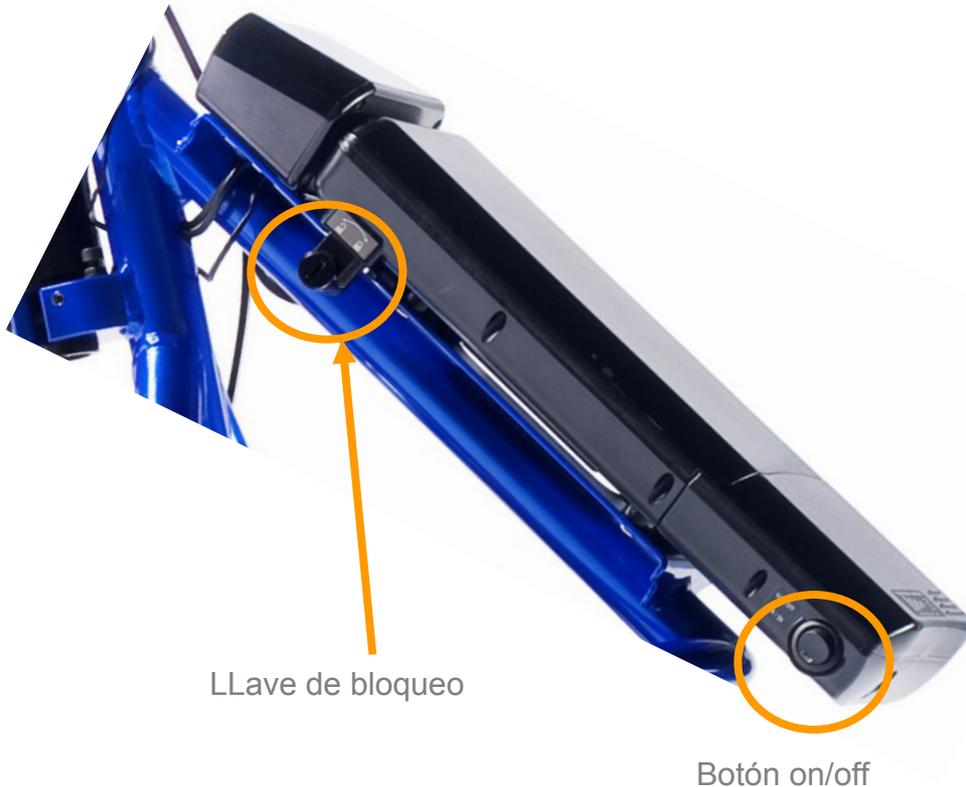

- Batería de litio-ion de 13,4 Amph
- Sin efecto memoria (si se hacen cargas parciales, la batería no coge “vicios” y carga hasta el 100%, sin reducir su capacidad)
- Con indicador de carga
- Llave de bloqueo (evita que se pueda quitar la batería, la bloquea en su sitio)
- Botón on/off de encendido y apagado
- 3 años de garantía
- Cargador de serie
- Opción de batería y cargador adicional

Pantalla - Attitude Híbrida

- Amplia pantalla de 2.4"
- Marca Neodrives
- Con indicador de velocidad media
- Velocidad máxima
- Tiempo de viaje
- Distancia del recorrido
- Kilómetros totales
- Indicador de carga de batería
- Distintos Modos (eco, boost, tour...)
- Hora
- Autonomía disponible en km
- Micro USB para cargar el móvil...

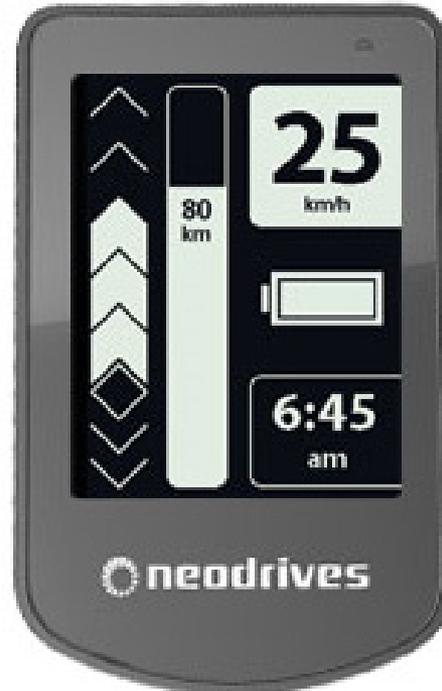

Consulta siempre el manual de instrucciones previo uso de tu handbike

Pantalla - Attitude Eléctrica




- Amplia pantalla de 2.4"
- Marca Ansmann
- Con indicador de velocidad media
- Velocidad máxima
- Tiempo de viaje
- Distancia del recorrido
- Kilómetros totales
- Indicador de carga de batería



Consulta siempre el manual de instrucciones previo uso de tu handbike


Ajustes - Attitude Híbrida y Manual

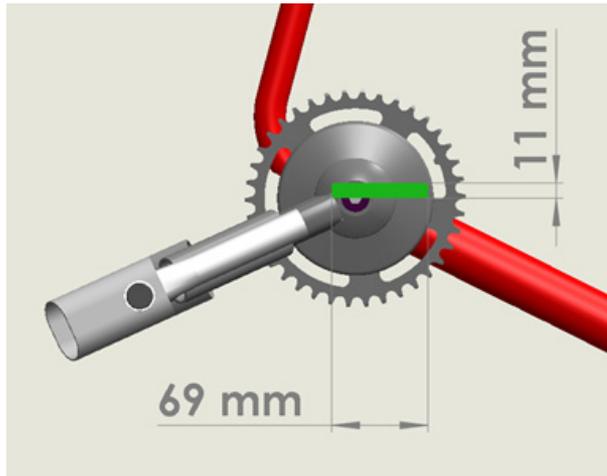

Posición de las bielas – longitud del brazo


La posición de las bielas puede ajustarse un máximo de 6.9 cm horizontalmente, y 1.1 cm en altura

Ajustes - Attitude Híbrida y Manual

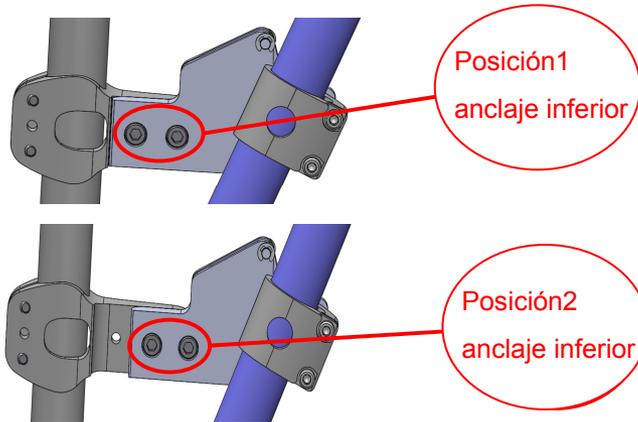

Posición del cuerpo con respecto a las bielas


Los anclajes inferiores de la handbike tienen distintas posiciones (posición 1 y posición 2) que permiten alejar o acercar más la handbike al usuario

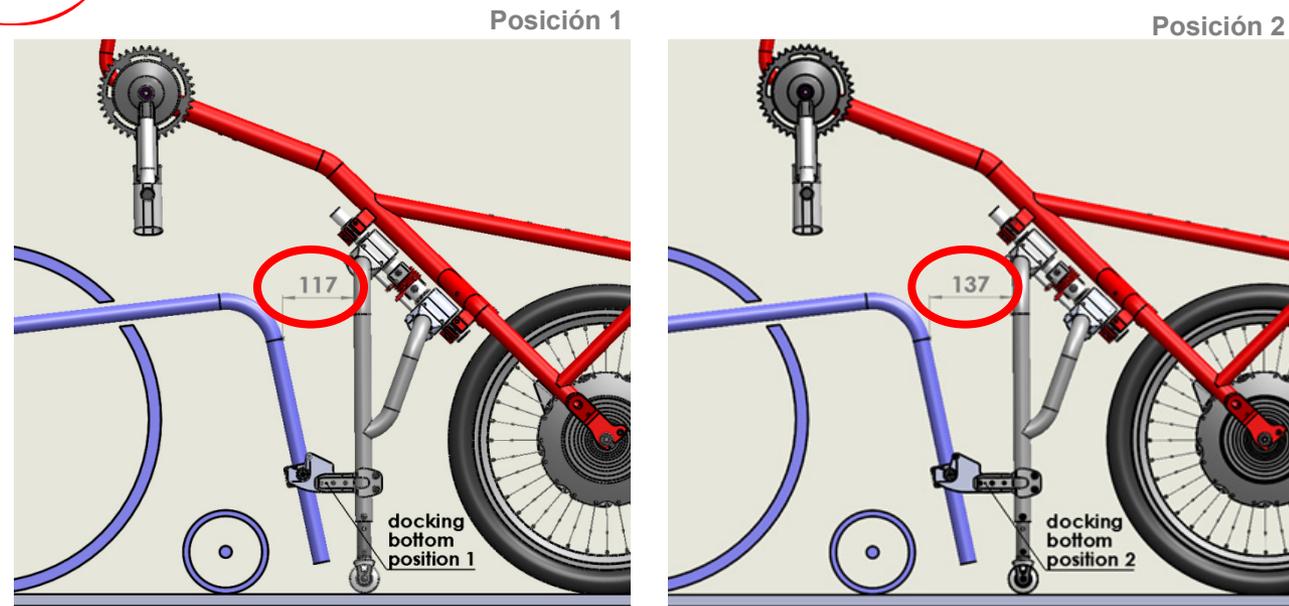


La distancia variará en función de la configuración de la silla (ángulo armazón, altura delantera..etc)

Ajustes - Attitude Eléctrica

Posición del manillar – longitud del brazo

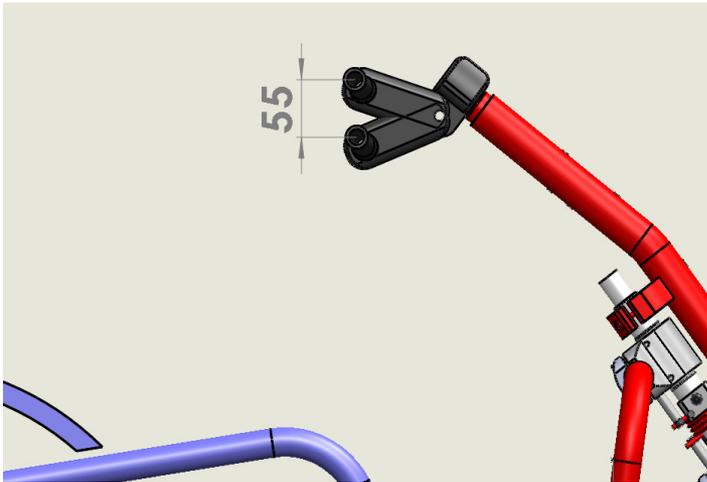


La altura del manillar puede ajustarse un máximo de 5.5 cm cambiando el ángulo del vástago.

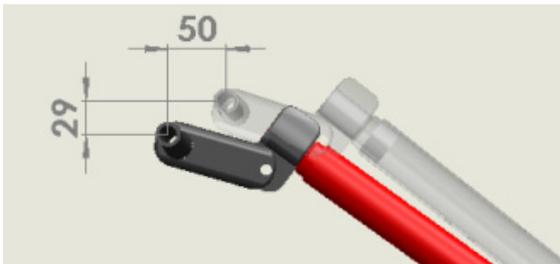

Y también permite un ajuste horizontalmente de 5 cm, y en altura de 2.9 cm, para conseguir la postura más cómoda para el usuario


Ajustes - Attitude Eléctrica

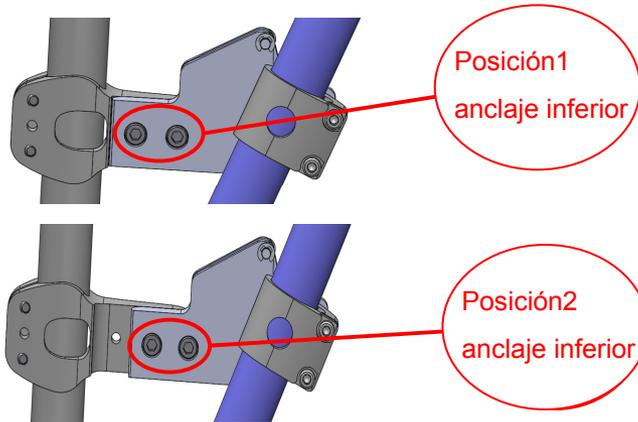


Posición del cuerpo con respecto al manillar

Los anclajes inferiores de la handbike tienen distintas posiciones (posición 1 y posición 2) que permiten alejar o acercar más la handbike al usuario

Posición 1

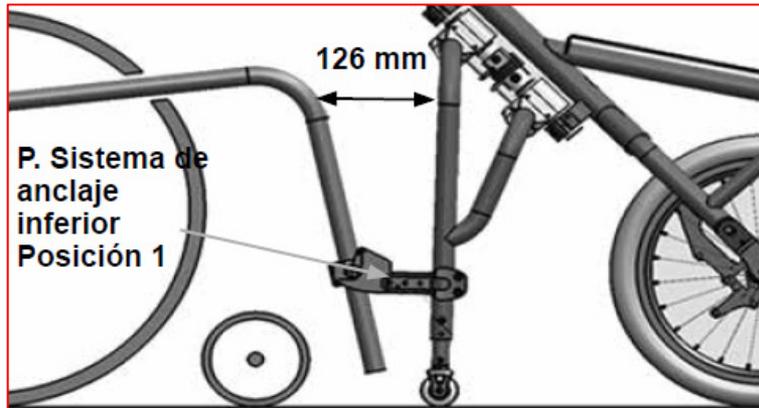

Posición 2

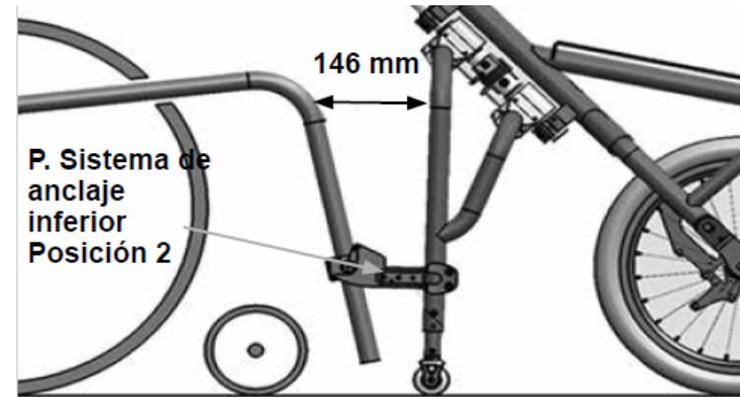

La distancia variará en función de la configuración de la silla (ángulo armazón, altura delantera..etc

Opciones



Espejo retrovisor




Soporte para botellines



Timbre



Soporte para alforjas

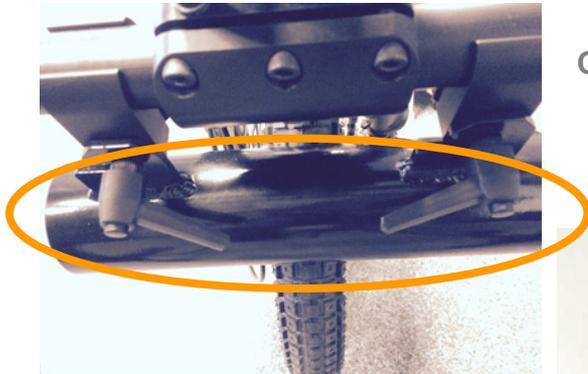

Contrapeso – 5 kgs



Multiherramienta



ATTITUDE	Manual	Híbrida	Eéctrica
Peso máx. usuario	100 kg	100 kg	100kg
Para sillas de ancho (aj. + 2cm)	26 a 46 cm	26 a 46 cm	26 a 46 cm
Peso total	14,5 kg	21,5 kg	15,3 kg
Velocidad máxima	-	23 km/h	23 km/h
Frenos	Disco (160 mm)	Disco (160 mm)	Disco (160 mm)
Freno de estacionamiento	Disco (160 mm)	Disco (160 mm)	Disco (160 mm)
Anchura bielas en V	470 mm	470 mm	-
Longitud bielas en V	170 mm	170 mm	-
Anchura manillar	-	-	570 mm
Mandos de cambio	Trigger SRAM X5 / Grip shift SRAM X0	Trigger SRAM X5 / Grip shift SRAM X0 / Universal	-
Velocidades	3 x 10	10	-
Motor	-	250 W	250W
Baterías	-	14,5 Ah	13,4 Ah
Ruedas	20"	20"	16"
Guardabarros	Sí	Sí	Sí

Siente la libertad como nunca antes!

